

Service de traitement stérile

DÉCOUVREZ LE LAVAGE PERFORMANT AVEC UN FLUX COMPLET DE GRANDE CAPACITÉ



Laveur-
désinfecteur
multi-chambres
RELIANCE™
VISION™

La conception élégante et ergonomique du laveur-désinfecteur multi-chambres Reliance Vision permet une automatisation totale et un traitement continu des CSSD avec des contraintes d'espace. L'empreinte modulaire optimise votre espace et favorise un excellent flux de travail.



PRODUCTIVITÉ


- Retraite jusqu'à 400 plateaux lorsqu'il fonctionne à sa capacité maximale
- Offre une flexibilité lors du retraitement d'un vaste éventail d'instruments chirurgicaux avec des configurations à plusieurs portoirs
- Permet d'obtenir un lavage multifonctionnel de haute qualité avec des cycles consécutifs associés à des nettoyants spécifiques
- Diminue le temps de séchage grâce à la chambre de séchage de haute capacité, qui achemine de l'air via deux ports pour augmenter la couverture du flux d'air



PERFORMANCE



- Vous apporte l'assurance nécessaire pour une performance régulière, l'association de nos buses de pulvérisation sur bras croisés, des options d'impact et des pompes à double vitesse créent un schéma de pulvérisation de couverture totale
- Des bras de pulvérisation plus longs avec des buses coudées offrent une couverture maximale, permettant de s'assurer qu'aucune zone n'est laissée intacte
- Capacité à connecter jusqu'à 8 instruments à lumière (sur un portoir à 3 niveaux) par charge

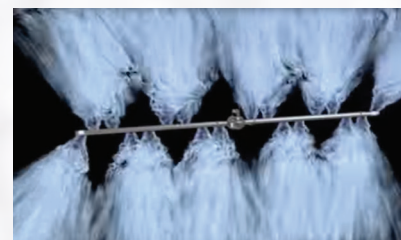




FACILITÉ D'UTILISATION

- Augmentation de la confiance et de la sécurité du personnel avec notre panneau de commande intuitif à grand écran tactile LCD, qui offre une visibilité et un accès clairs aux informations essentielles



- Des poignées froides au toucher permettent une manipulation immédiate et en toute sécurité des charges après la fin du cycle

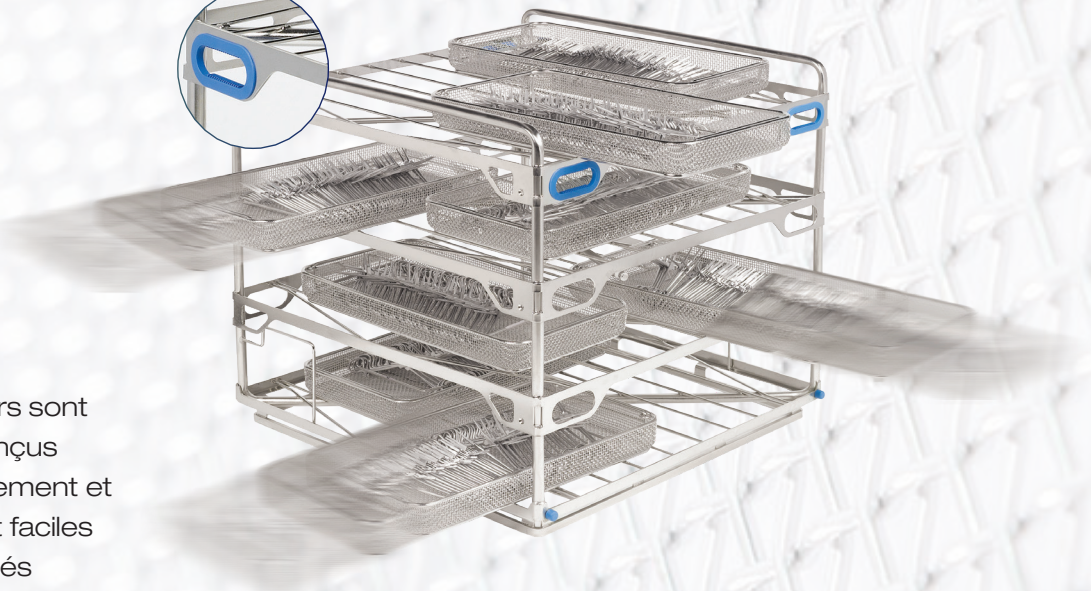

- Tous les portoirs sont habilement conçus pour un chargement et déchargement faciles de tous les côtés

- La facilité d'entretien est plus efficace grâce à une porte d'accès facile placée sur la paroi latérale du laveur



ÉCONOMIES ET ÉCOLOGIE

Les laveurs-désinfecteurs multi-chambres Reliance Vision sont conçus pour fonctionner efficacement avec des cycles rapides et performants, à l'aide de nettoyeurs concentrés et biodégradables.

Le laveur-désinfecteur multi-chambres Reliance Vision utilise jusqu'à

58 % MOINS D'EAU

par cycle*

**NETTOYANTS
CONCENTRÉS ET
BIODÉGRADABLES**

**FONCTIONNEMENT
EFFICACE**

**RÉDUIT L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT**



144
LITRES
PAR CYCLE

Laveur-désinfecteur
multi-chambres
Reliance Vision



348
LITRES
PAR CYCLE

Laveur-désinfecteur
multi-chambres
Reliance™ 777

Dimensions (L x H x P) :

Dimensions générales d'un laveur-désinfecteur entièrement équipé :

1 067 x 2 150 x 4 064 mm

Hauteur de chargement : 787 mm à partir du sol

Hauteur sous plafond minimale requise : 2 200 mm

*Calculs qui reposent sur les coûts nationaux moyens.

Le laveur-désinfecteur multi-chambres Reliance Vision fait partie d'une chaîne continue de solutions innovantes de STERIS

Pour découvrir quel laveur-désinfecteur correspond aux besoins de votre service, contactez votre représentant STERIS

 **STERIS**