

CONÇUS POUR UN RETRAITEMENT PRODUCTIF

Stérilisateur à la vapeur de taille moyenne AMSCO™ série 400

Les stérilisateur à la vapeur AMSCO constituent la norme industrielle en matière de stérilisation à la vapeur depuis plus de 100 ans. Le stérilisateur à vapeur de taille moyenne AMSCO 400 offre des performances éprouvées et des avancées technologiques pour fournir la capacité de servir **les salles d'opération les plus chargées d'aujourd'hui.**





Stérilisation à haut volume et conformité aux normes industrielles



Traite jusqu'à 15 plateaux et 170 kg par cycle

La charge maximale est basée sur des plateaux de 11,3 kg dans des chambres de 152,4 cm.

Le cheval de bataille de votre stérilisation centrale

- Conforme aux directives de l'AAMI pour les plateaux de 11,3 kg
- Noms de cycles personnalisables
- Cycles entièrement programmables pour répondre aux recommandations de traitement du fabricant d'instruments



Connectivité pour une
conservation et une
récupération efficaces
des données



Conception intelligente pour économiser l'eau et l'énergie



Fonctionnement écologique - sain pour la planète et vos résultats financiers



- Pompe à vide électrique standard avec chaque unité
- Aide à atteindre vos objectifs de certification LEED
- Capteurs permettant de réduire les besoins en eau de refroidissement
- Arrêt automatique programmable des servitudes
- Entièrement isolée pour minimiser les pertes de chaleur dans l'environnement



Conception conviviale pour le personnel... Alimenté par des commandes intuitives

Des caractéristiques uniques à valeur ajoutée améliorent l'efficacité et la satisfaction du personnel

La porte à charnière peut être actionnée d'une seule main



Chargement facile à chaque fois grâce à la station d'accueil



La chambre elliptique assure une distribution uniforme de la pression et une longue durée de vie de la chambre




Amélioration de la productivité du personnel grâce à l'affichage très visible de la phase du cycle et du temps restant



Réduction de l'excès de condensation grâce à une construction entièrement gainée qui enveloppe toute la chambre de vapeur

Empêche l'air de pénétrer dans la chambre et ne nécessite jamais de lubrification grâce au joint activé par la vapeur

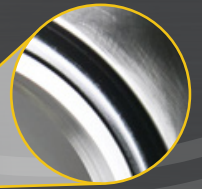



Construction durable

AMSCO - le nom qui signifie qualité et fiabilité dans la stérilisation à la vapeur



- Garantie de 15 ans pour la chambre
- La seule garantie de 2 ans sur les joints d'étanchéité de l'industrie



Configurations flexibles



*Stérilisateur de taille moyenne AMSCO™ série 400
avec porte à charnière manuelle
(660 x 950 mm)*

*Stérilisateur de taille moyenne AMSCO™ série 400 avec
porte coulissante horizontale automatique
(660 x 950 mm)*

Concevoir un stérilisateur qui réponde aux besoins spécifiques de votre établissement

- Disponible en trois longueurs de chambre : 91,4 cm, 121,9 cm et 152,4 cm
- S'adapte à l'empreinte du modèle de stérilisateur précédent
- Configurable avec une porte simple ou des portes doubles pour un flux de travail continu
- Installation encastrée dans le mur ou autonome avec l'armoire



Minimiser les temps d'immobilisation des équipements...



Maximiser le retour sur investissement

- Accès sûr et facile à tous les composants depuis l'avant et le côté gauche du stérilisateur
- Contrôle à distance en temps réel du fonctionnement du stérilisateur et des paramètres du cycle avec ProConnect
- Maintenance préventive et contrats de service complets
- Soutenus par le plus vaste réseau de techniciens de service qualifiés de l'industrie



Surveillance des performances de l'équipement pour maximiser le temps de fonctionnement



Complètement prêt

STERIS fournit tous les produits et services dont vous avez besoin pour réussir



Garantir la conformité grâce à une gamme complète de **produits d'assurance de la stérilité**

STERIS

UNIVERSITY

Votre source de crédits de formation continue en soins de santé



Formules chimiques conçues pour un nettoyage optimal des chambres

Les stérilisateur à la vapeur de taille moyenne AMSCO série 400 font partie d'une chaîne ininterrompue de solutions innovantes de STERIS.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre représentant STERIS.

 **STERIS**